


Dr. Mayer

S nabíječkou Elektrický zubní kartáček Sonic

Návod k použití

Model: GTS2065

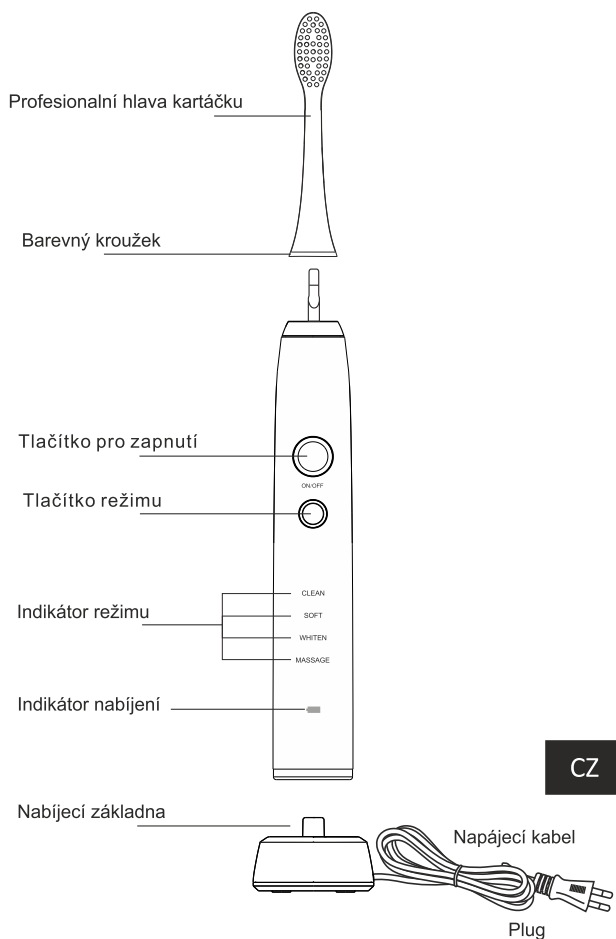

**PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY
POKYNY**

49

DŮLEŽITÉ OPATŘENÍ

Pouze při používání dle pokynů je elektrický zubní kartáček bezpečný a účinný. Stejně jako u všech elektrických spotřebičů je však třeba dodržovat základní bezpečnostní opatření, zejména v přítomnosti dětí

NEBEZPEČÍ STYKU S TEKUTINOU

Chcete-li snížit riziko popálení, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění::

- Neumísťujte nebo neskladujte základnu nabíječky, kde by mohla spadnout, nebo spadnout do vany, umyvadla nebo toalety.
- Neumísťujte nebo nenabíjejte nabíječku ve vodě ani do jiné kapaliny.
- Nedotýkejte se výrobku, který spadl do vody nebo jiné kapaliny. Okamžitě vyjměte kabel ze zásuvky.
- Nepoužívejte výrobek během koupání.

Před čištěním vyjměte kabel ze zásuvky a ujistěte se, že je před opětovným zapojením do elektrické zásuvky suchý

NEBEZPEČÍ V SOUVISLOSTI S NAPĚTÍM

Chcete-li snížit riziko popálení, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění:

- Nezapojte základnu nabíječky do elektrické zásuvky, kde je aktuální napětí odlišné od napětí uvedené na spodní straně nabíječky.
- Tento výrobek je navržen tak, aby pracoval v rozsahu napětí 100-240 voltů.
- Převodníky napětí nezaručují kompatibilitu.
- Nevkládejte zástrčku do zásuvky na síle.
- Pokud nelze zástrčku snadno zasunout do zásuvky, přestaňte ji používat.

NEBEZPEČÍ – UPOZORNĚNÍ

Chcete-li snížit riziko popálení, úrazu elektrickým proudem, požáru nebo zranění:

- Osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí by neměli s přístrojem manipulovat, pokud nebyli o používání přístroje předem poučeny nebo nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.
- Dohlédněte na to, aby si s přístrojem nehrály děti.
- Používejte tento výrobek výhradně tak, jak je popsáno v této příručce. Tento výrobek je určen pouze k čištění zubů, dásní a jazyku. Nepoužívejte žádné jiné hlavy nebo rozšíření než doporučené výrobem.
- Zubní kartáček je produkt osobní hygieny a jeho účelem není používat v zubní ordinaci.
- Pokud vaše zubní pasta obsahuje vodík, hydrogenuhličitan sodný nebo jiný bikarbonát (běžně používaný při bělení zubů), důkladně očistěte kartáčovou hlavu a rukojeť tak, aby nedošlo k uvolnění plastů.
- Nikdy nezapojte tento výrobek, pokud má poškozený kabel, zástrčku nebo základnu nabíječky.

Nepoužívejte tento výrobek, pokud nefunguje správně, pokud spadl nebo byl poškozen, nebo pokud spadl do vody. Okamžitě přestaňte používat, jestliže produkt vypadá nějakým způsobem poškozeným.

50

- Nepokládejte zubní kartáček, základnu nabíječky a napájecí kabel na vyhřívaný povrch.
- Pokud se u Vás objeví úzkost nebo bolest v ústech, přestanete používat a obraťte se na zubního lékaře.
- Nepokoušejte se vyjmout baterii.
- Neumývejte zubní kartáček v myčce nádobí.
- Tento produkt má dvoupólovou zástrčku (jeden pól širší než druhý). Jako bezpečnostní funkce může být tato zástrčka zasunutá do dvoupólové zásuvky pouze jedním způsobem. Pokud zástrčku nemůžete zcela zasunout do zásuvky, otočte ji. Pokud stále nefunguje, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře. Nepokoušejte se prolomit tuto bezpečnostní funkci.
- Výrobek nepoužívejte na volném prostranství nebo na místech, kde jsou používány přípravky na rozprašování, nebo na místech, kde je používán tekutý kyslík.
- Zubní kartáček mohou používat děti a lidé se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo děti a lidé kteří nemají dostatečné zkušenosti a znalosti, pokud jsou pod dohledem, nebo jsou jim poskytnuty pokyny pro bezpečné používání přístroje a pokud chápou související rizika. Děti nesmí provádět údržbu bez dozoru.
- Děti by si s přístrojem neměly hrát.
- Před vyhozením spotřebiče, musí být baterie vyjmutá.
- Při nabití baterii, musí být spotřebič odpojen ze sítě.
- Baterie je umístěna bezpečným způsobem.
- Pokud je napájecí šňůra poškozena, musí být vyměněna výrobcem, jeho servisem nebo obdobně kvalifikovanou osobou, aby se předešlo nebezpečí.
- Chcete-li zjistit, jak čistit povrch zubních kartáčů, které jsou v kontaktu s rukama a pokožkou, podívejte se na část < ÚDRŽBA >.

ZDRAVOTNÍ UPOZORNĚNÍ

- Pokud jste v posledních dvou měsících podstoupili operace úst nebo dásní, obraťte se na svého zubaře před použitím tohoto produktu.
- Pokud se při použití tohoto produktu vyskytne silné krvácení nebo pokud pokračuje slabé krvácení po jednom týdnu používání, poraďte se se svým zubním lékařem.
- Máte-li jakékoli dotazy týkající se kombinovaného použití tohoto přípravku s kardiostimulátorem nebo jiným implantovaným zdravotnickým prostředkem, poraďte se s lékařem nebo výrobcem implantovaného zdravotnického prostředku před použitím tohoto produktu.
- Pokud máte nějaké obavy o své zdraví, poraďte se se svým lékařem před použitím zubního kartáčku.
- Zubní kartáček byl testován a certifikován podle pravidel FCC VOC (Potvrzení shody společnosti US Communications Commission) a CE (shoda s evropskými normami).
- Vždy odpojte tento výrobek ze zásuvky ihned po jeho použití.
- Nikdy nepoužívejte tento výrobek, když jste ospalí nebo unavení.


ULOŽTE TYTO POKYNY

SPUŠTĚNÍ POUŽITÍ

Nabíjení kartáčku


Ujistěte se, že je váš kartáček vypnut před nabitím. Zapojte zástrčku do zásuvky. Vložte rukojeť do nabíječky. Indikátor nabíječky se rozsvítí a indikuje, že se rukojeť nabíjí.

Po úplném nabití baterie bude kontrolka nabíjení zelená, což znamená, že je zubní kartáček plně nabitý.

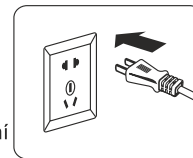


Poznámky:

- 1 Úplné nabití baterie trvá nejméně 24 hodin.
- 2 Zubní kartáček musí být nabíjen 24 hodin při:
 - a. Prvním použití zubního kartáčku;
 - b. Zubní kartáček nebyl používán déle než tři měsíce;
- 3 Chcete-li baterii plně nabit nechte zubní kartáček v nabíječce.
- 4 Kartáček se během nabíjení zahřeje – normální stav.
- 5 Doba provozu baterie se postupem času zkracuje. Pokud zubní kartáček po úplném nabití funguje pouze omezený čas, znamená to, že baterie je blízko konce své životnosti. Kontaktujte Centrum podpory.

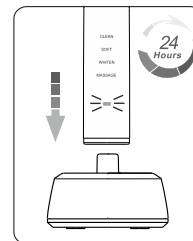


POUŽÍVÁNÍ KARTÁČKU

- 1 Umístěte hlavici kartáčku na rukojeť. Přitiskněte hlavici kartáčku dolů, dokud se pevně nedotýká rukojeti. Poznámka: Mezi barevnými kroužky a rukojetí je malý prostor. (Obrázek 1)
- 2 Namočte kartáček a aplikujte malé množství zubní pasty.
- 3 Umístěte zubní kartáček s malým úhlem na pravou stranu. (Obrázek 2)
- 4 Chcete-li vybrat provozní režim, stiskněte tlačítko režimu. Pokud víte, který režim jste použili naposledy, není třeba zvolit znovu režim. Existují 4 režimy.
 - a. **ČIŠTĚNÍ:** Standardní mycí metoda pro povrchové čištění zubů.
 - b. **SOFT:** Zvláště jemný režim pro citlivé zuby a dásně.
 - c. **BĚLENÍ:** Čištění zubů s leštěním a bělení.
 - d. **MASÁŽ:** Pulsace pro jemnou stimulaci dásní.

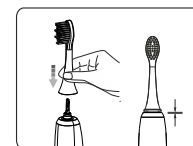

Obrázek 1

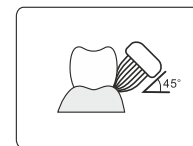

Obrázek 2

Poznámky:

Pokud během čištění zubů stisknete tlačítko režimu, kartáček bude pracovat v dalším režimu a bude zahájen nový 2 minutový cyklus a indikátor režimu se rozsvítí


5 Použijte lehký tlak a opatrně spusťte čistící hlavu na zuby a malými pohyby dopředu a dozadu proveďte ústní hygienu.

6 Chcete-li maximalizovat účinnost čištění zubů, rozdělte ústa na 4 části. Začněte s částí 1 a čistíte každou část 30 sekund. Otáčení kartáčku se zastaví po každých 30 sekundách, což znamená, že je nutné přejít na další část úst. Po 2 minutách provozu kartáček přestane pracovat. (Obrázek 3)


7 Vytáhněte hlavu kartáčku z rukojeti. (Obrázek 4)

8 Opláchněte hlavu produktu a rukojeti pod tekoucí vodou a osušte ji otřením. (Obrázek 5)

9 Vložte rukojeť zpět do nabíječky.

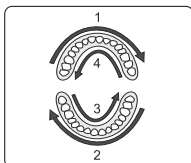

Obrázek 3

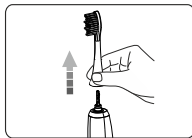

Obrázek 4




Obrázek 5

ÚDRŽBA

Před čištěním výrobku se ujistěte, že jste odpojili zástrčku ze zásuvky.


Zubní kartáček

- 1 Odstraňte hlavici kartáčku.
- 2 Utřete všechny povrchy vlhkým hadříkem a umístěte rukojeť zpět do nabíječky. Neponořujte rukojeť do vody.
- 3 Po každém použití opláchněte kartáčovou hlavici a kartáček
- 4 Neumývejte v myčce nádobí.

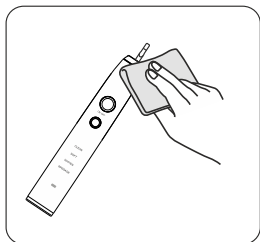

Nabíječka

- 1 Pomocí měkkého hadříku odstraňte všechny nečistoty z nabíječky
- 2 Občas vyčistěte zástrčku, abyste zajistili, že zůstane v dobrém provozním stavu. Sběr prachu nebo nečistot na zástrčce může způsobit úraz elektrickým proudem, přehřátí nebo požár.

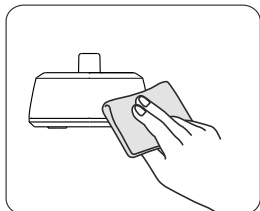

ŘEŠENÍ PROBLÉMU


Problém	Možná příčina	Řešení
Zubní kartáček nefunguje.	Právě jste si koupili výrobek, který nebyl používán déle než 3 měsíce.	Nabijte hlavní jednotku nejméně 24 hodin.
Slabé nebo tlumené vibrace.	Zubní kartáček je silně přitisknut na zuby.	Položte čistící hlavu jemně na zuby.
Zubní kartáček pracuje jen krátkou dobu, a to ihned po nabíjení.	Baterie dosáhla konce své životnosti.	Kontaktujte Centrum podpory.
	Doba nabíjení nestačí.	Nabíjejte hlavní jednotku nejméně 24 hodin.

LIKVIDACE

Zdrojem napájení tohoto produktu je lithium-iontová baterie, kterou lze recyklovat. Po ukončení životnosti výrobku vyjměte baterii před tím, než produkt recyklujete nebo zlikvidujete v souladu s místními požadavky na nakládání s odpady. Máte-li jakékoli dotazy ohledně recyklace, kontaktujte místní oddělení pro nakládání s odpady.




Vyjmutí a recyklace baterie

Nikdy produkt nerozebírejte, s výjimkou případů, kdy je likvidován. Pokud to uděláte dříve, produkt bude zničen. Dodržujte základní bezpečnostní opatření.

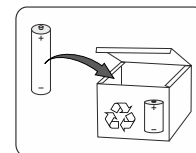

Po vybití baterie musí být spotřebič odpojen od sítě.

- 1 Než vyjměte baterii, nezapomeňte ji zcela vybit.
- 2 Pomocí šroubováku odstraňte kryt šroubu a kryt baterie.
- 3 Držte rukojeť vzhůru nohama, stiskněte tělo rukojeti a vyjměte dva háky na vnitřní straně rukojeti.
- 4 Vložte šroubovák vedle přípojek baterie a otočte jej, aby došlo k povolení konektorů. Vyjměte desku s plošnými spoji a vyjměte baterii z plastového držáku.
- 5 Baterii řádně recyklujte nebo likvidujte. Zeptejte se místní služby nakládání s odpady, zda přijme zbývající součásti zubního kartáčku k recyklaci.

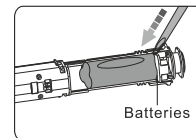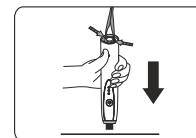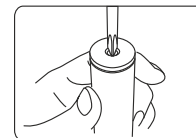

Dbejte na to, aby nedošlo k připojení negativního a pozitivního pólu baterie. Po vyjmutí baterie nepřipojujte spotřebič k síti.

Distributor pro ČR/SK Best Brands Company s.r.o. www.drmayer.cz

Dr. Mayer
Life and Health

